

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog






















Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Funktionsübersicht gesperrte Kniegelenke


Alle Kniegelenke werden komplett montiert ausgeliefert. Die spielfreien, selbstschmierenden und schmutzunempfindlichen Gelenke gibt es je Baugruppe in mindestens 6 Größen. Das modulare Zubehör Extensor, Move und Strecker kann jederzeit ergänzt oder getauscht werden. **Das Zubehör bildet eine Funktionsergänzung für das Kniegelenk.**



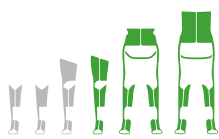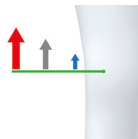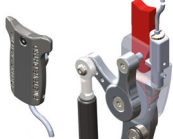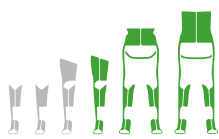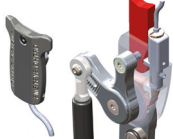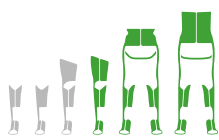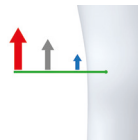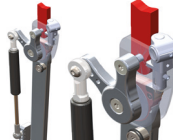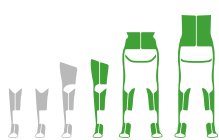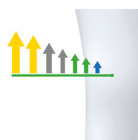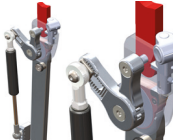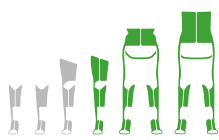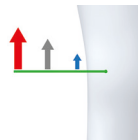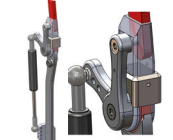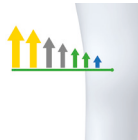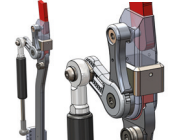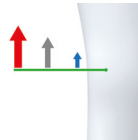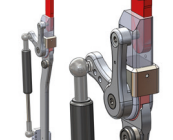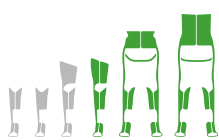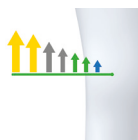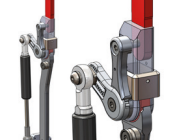Orthese	gesperrt	Streckung in	Beugung bis	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	Sperrmechanismus	wasserbeständig	
										 Varo-KA-0 Seite 108 - 109
										 Varo-PS-0 Seite 114 - 115
										 Konso-5 Seite 120 - 121
										 Konso-0 Seite 126 - 127
										 Klassik-Konso Seite 132 - 133
										 Blocker Seite 134 - 135
										 Klassik-Konso mit Slide Seite 136 - 137


Orthese	gesperrt	Streckung in	Beugung bis	rückverlagert	modular	Kraft- unterstützung	kein Feilen nötig	Sperr- mechanismus	wasser- beständig	
										 Varo-KA-0 mit Dynamic-0-S Seite 110 - 111
										 Varo-KA-0 mit Dynamic-0-N Seite 112 - 113
										 Varo-PS-0 mit Dynamic-0-S Seite 116 - 117
										 Varo-PS-0 mit Dynamic-0-N Seite 118 - 119
										 Konso-5- mit Move-5-S Seite 122 - 123
										 Konso-5- mit Move-5-N Seite 124 - 125
										 Konso-0- mit Move-0-S Seite 128 - 129
										 Konso-0- mit Move-0-N Seite 130 - 131

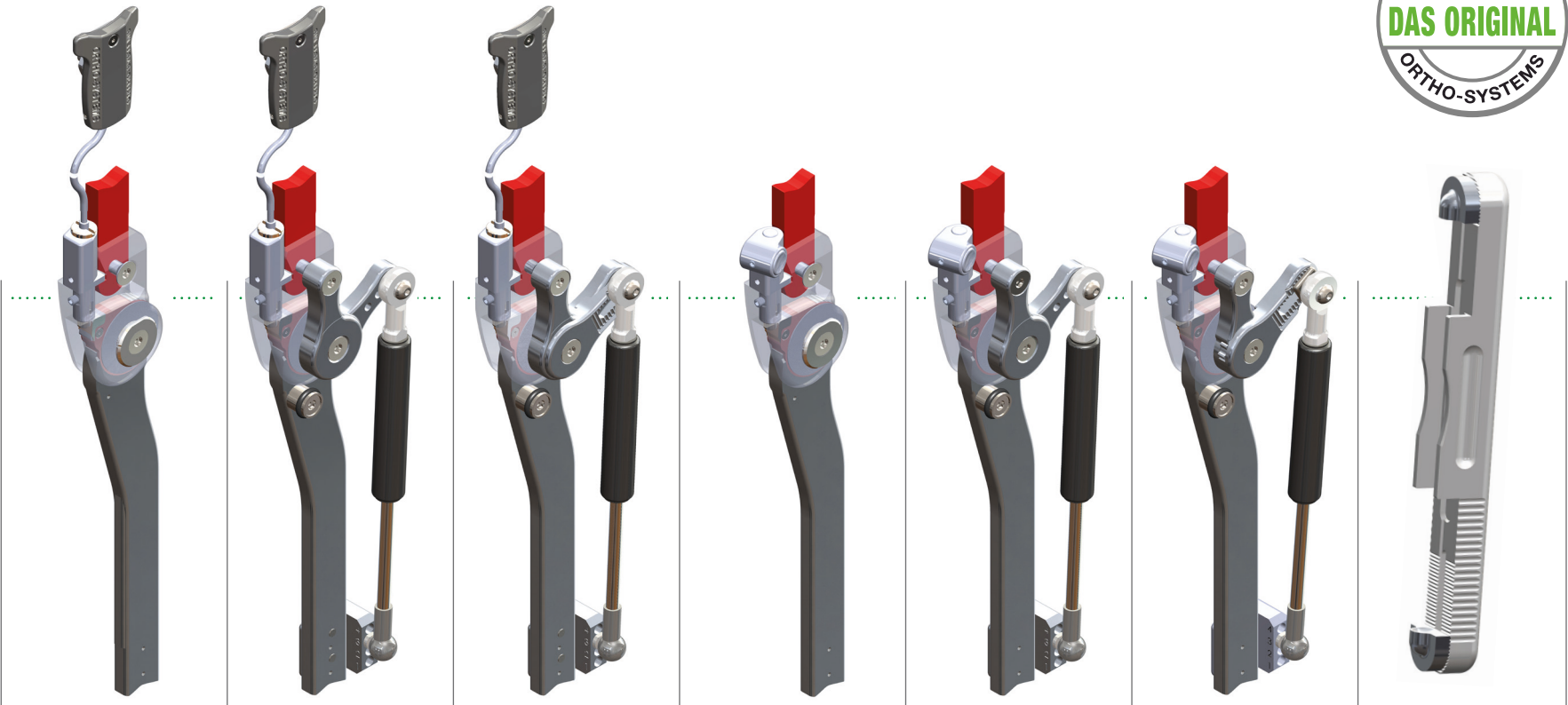gesperrte Kniegelenke mit Streckhilfen



Grundgelenk	Varo-KA-0	Varo-KA-0	Varo-KA-0	Varo-PS-0	Varo-PS-0	Varo-PS-0	
Einsatzgebiet	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	
modulares Zubehör		Dynamic-0-S	Dynamic-0-N		Dynamic-0-S	Dynamic-0-N	
Hebel-Kraftanpassung		3 Positionen	7 Positionen		3 Positionen	7 Positionen	
max. Beugewinkel	130 Grad	115 Grad	95 bis 125 Grad	130 Grad	115 Grad	95 bis 125 Grad	
Kraft Unterstützung		bis maximale Kraft	normale Kraft		bis maximale Kraft	normale Kraft	
G-Dämpfer trennbar		möglich			möglich		
Sperrmechanismus	Kabelzug	Kabelzug	Kabelzug	Pre-select	Pre-select	Pre-select	
öffnen	Satellit Öffnungsmodus	Satellit Öffnungsmodus	Satellit Öffnungsmodus	Öffnungsknopf betätigt	Öffnungsknopf betätigt	Öffnungsknopf betätigt	
schliessen	Satellit Sperrmodus	Satellit Sperrmodus	Satellit Sperrmodus	Schliessknopf betätigt	Schliessknopf betätigt	Schliessknopf betätigt	
geöffnet halten	Satellit Öffnungsmodus	Satellit Öffnungsmodus	Satellit Öffnungsmodus	Öffnungsknopf betätigt	Öffnungsknopf betätigt	Öffnungsknopf betätigt	
Anziehhilfe		ja	ja		ja	ja	Anziehhilfe-Rudi
	Seite 108-109	Seite 110-111	Seite 112-113	Seite 114-115	Seite 116-117	Seite 118-119	Seite 146-147

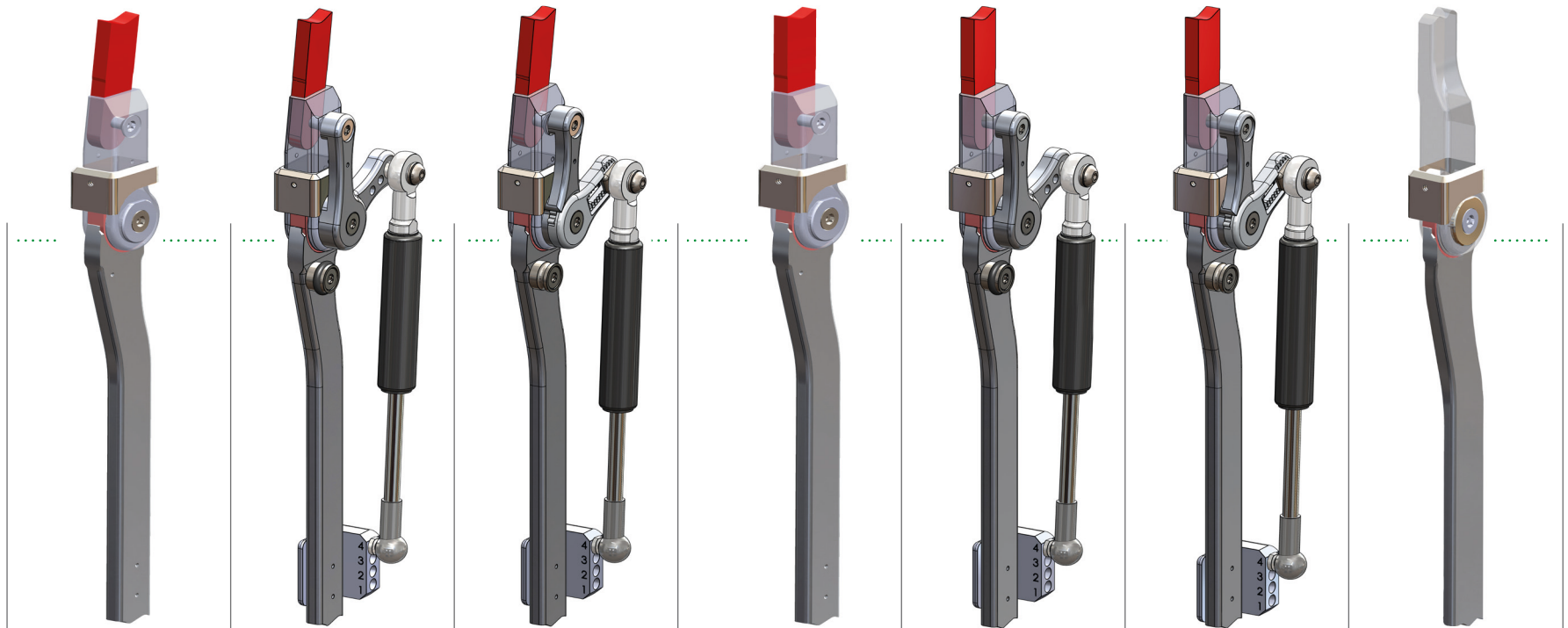► Auf den Seiten 82 - 83
finden sie die Anwen-
dungsmöglichkeiten
zur Kraftunterstützung



Grundgelenk	Konso-5	Konso-5	Konso-5	Konso-0	Konso-0	Konso-0	Klassik-Konso
Einsatzgebiet	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO	KAFO/HKAFO/RGO
modulares Zubehör		Move-5-S	Move-5-N		Move-0-S	Move-0-N	
Hebel-Kraftanpassung		3 Positionen	7 Positionen		3 Positionen	7 Positionen	
max. Beugewinkel	130 Grad	115 Grad	95 - 125 Grad	130 Grad	115 Grad	95 bis 125 Grad	130 Grad
Kraft Unterstützung		bis maximale Kraft	normale Kraft		bis maximale Kraft	normale Kraft	
G-Dämpfer trennbar		möglich			möglich		
Spermechanismus	Fallschloß	Fallschloß	Fallschloß	Fallschloß	Fallschloß	Fallschloß	Fallschloß
öffnen	Fallschloß anheben	Fallschloß anheben	Fallschloß anheben	Fallschloß anheben	Fallschloß anheben	Fallschloß anheben	Fallschloß anheben
schliessen	schliesst autark	schliesst autark	schliesst autark	schliesst autark	schliesst autark	schliesst autark	schliesst autark
geöffnet halten	federndes Druckstück	federndes Druckstück	federndes Druckstück	federndes Druckstück	federndes Druckstück	federndes Druckstück	
Anziehhilfe-Rudi		ja	ja	ja	ja	ja	
	Seite 120-121	Seite 122-123	Seite 124-125	Seite 126-127	Seite 128-129	Seite 130-131	Seite 132-133

