

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie



Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026


Geh-Podien im Vergleich

Die individuell gefertigte Körperschale: Nur eine exakte Fußbettung und die Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglichen die korrekte Aufrichtung der Hüft- und Kniegelenke. Durch die individuell angepasste Körperschale werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und gleichzeitig den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegengewirkt. Das auf den Patienten abgestimmte Körperlot ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Kopfes.

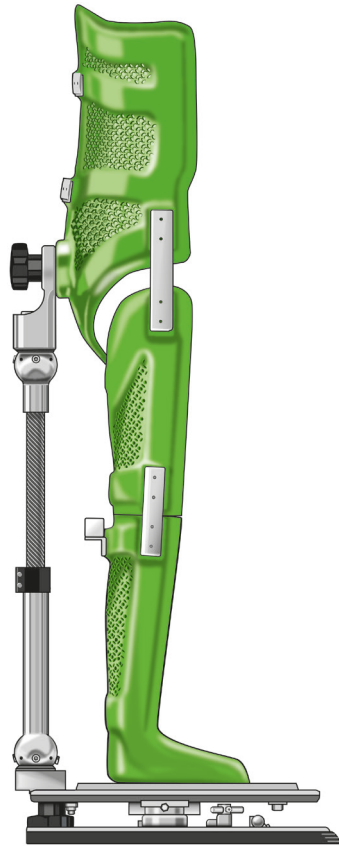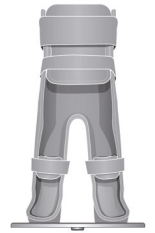

Foot-Walker

Standardausführung

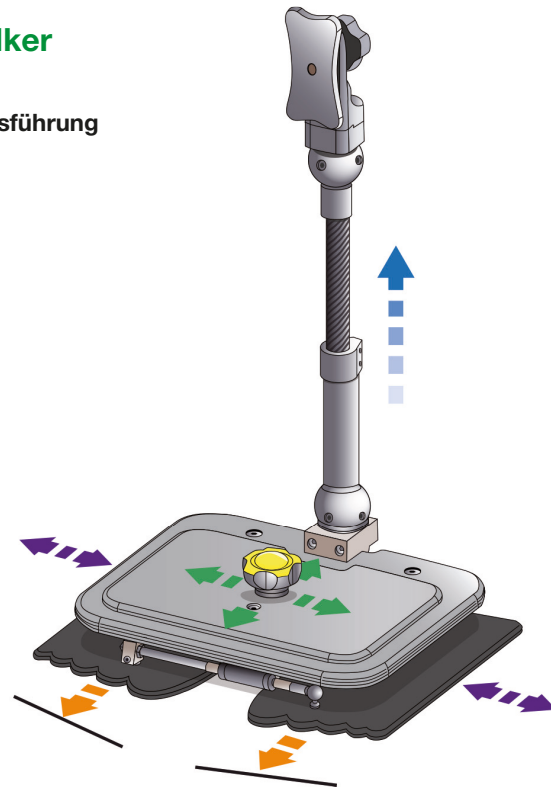

Leicht-Walker

um ca. 30% leichtere Ausführung




Funktionsübersicht Geh-Podium

Die Podien bilden mit einer individuell gefertigten Körperschale die Geheinheit. Die Geh-Podien besitzen einen tiefen Schwerpunkt, um so die Standsicherheit zu erhöhen. Die modularen Zusätze Handgriffe und Kippschutz sind zu allen Podien kompatibel und können auch im Nachhinein ergänzt werden. Es wird unterschieden in eine Aluminium Ausführung, dem **Foot-Walker**, und einen **Leicht-Walker** mit Teilen aus Carbon. Die universelle Verbindungsplatte zur unteren Fixierung der Körperschale, passt größenunabhängig auf das Stehbrett (siehe Steh-Podium).



geräuschgedämpft	mitwachsend	individuelle Anpassung			Körperschale		gewichtsreduziert	modularer Zusatz		
		Lotverschiebung	Schrittbreite	Schrittlänge	mit 3-Punkt Fixierung	abtrennbar		Handgriff	Kippschutz	
										 Foot-Walker Seite 194 - 195
										 Foot-Walker mit Zusatz KS Seite 195
										 Foot-Walker mit Zusatz HG Seite 195
										 Foot-Walker mit Zusatz HG und KS Seite 195
										 Leicht-Walker Seite 196-197
										 Leicht-Walker mit Zusatz KS Seite 197
										 Leicht-Walker mit Zusatz HG Seite 197
										 Leicht-Walker mit Zusatz HG und KS Seite 197

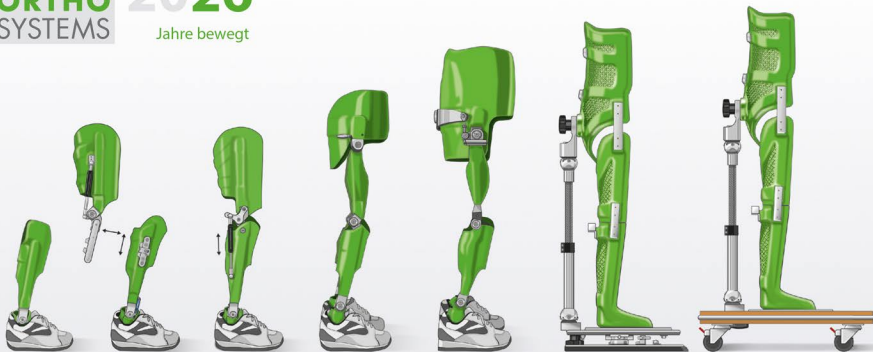

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwichuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de