

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie


Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026


Steh-Podien im Vergleich

Die individuell gefertigte Körperschale: Nur eine exakte Fußbettung und die Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglichen die korrekte Aufrichtung der Hüft- und Kniegelenke. Durch die individuell angepasste Körperschale werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und gleichzeitig den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegengewirkt. Das auf den Patienten abgestimmte Körperlot ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Kopfes.

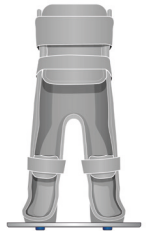


Stehbrett

Standardausführung

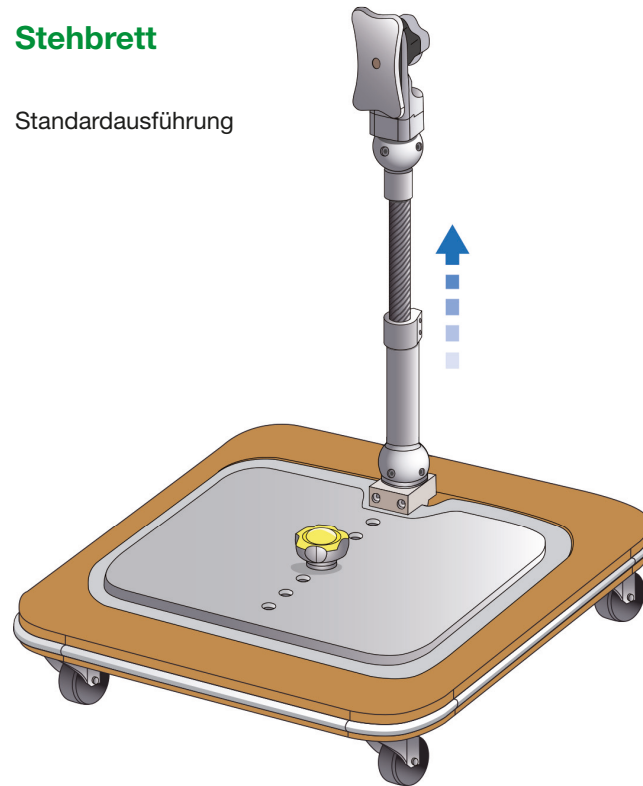

Stehfeld

auch für therapeutisch Nutzung

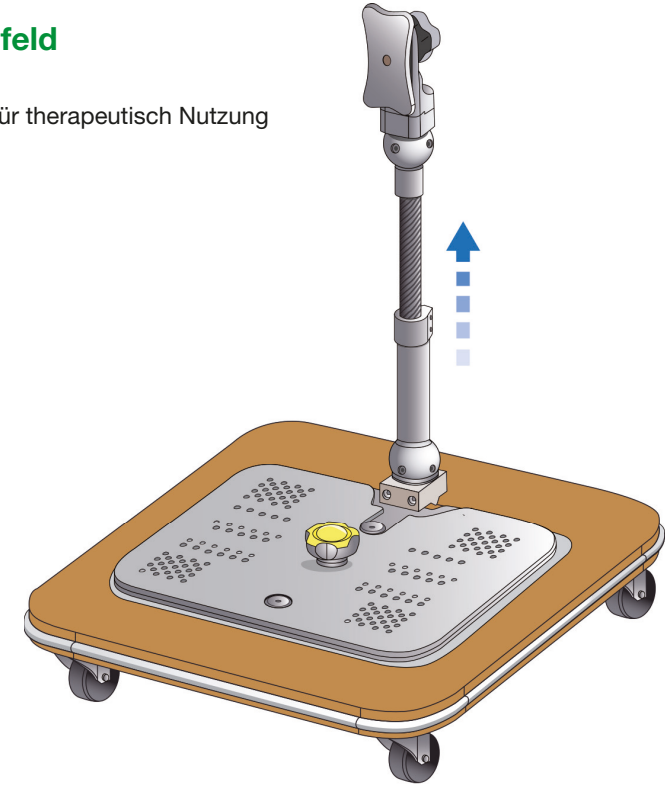


Die Steh-Einheit mit Körperschale: Kinder müssen das Stehen erleben, sobald sie versuchen, sich aufzurichten. Es ist wichtig, dass sie die Welt aus einer vertikalen Perspektive wahrnehmen und ihren Blick horizontal ausrichten können. Ebenso ist es bedeutsam, dass sie sich auf Augenhöhe mit anderen Kindern befinden. Dies verbessert ihr Wohlbefinden und ihre Aufmerksamkeit. Zudem hat das Stehen positive Auswirkungen auf die Durchblutung und das Herz-Kreislauf-System sowie auf Atmung, Verdauung und die Nieren- und Blasenfunktion. Es erhöht die Knochendichte, verringert das Risiko von Knochenbrüchen und fördert die Entwicklung des Hüftgelenks. Das Stehen ermöglicht auch das Spielen oder Arbeiten an einem Tisch.

Funktionsübersicht Steh-Podium

Die Podien bilden mit einer individuell gefertigten Körperschale die Steheinheit. Die modularen Zusätze Handgriffe und Kippschutz sind zu allen Podien kompatibel und können auch im Nachhinein ergänzt werden. Es wird zwischen **Stehbrett** und **Stehfeld** unterschieden. Das Stehfeld ermöglicht zusätzlich Körperlotübungen zur Verbesserung der Haltungskontrolle in der Therapie. Die universelle Verbindungsplatte des Stehbretts zur unteren Fixierung der Körperschale passt größenunabhängig auch auf die Geh-Podien, Foot-Walker und Leicht-Walker.



			Körperschale			modularer Zusatz		
mitwachsend	Standsicherung	Stoßschutz	mit 3-Punkt Fixierung	abtrennbar	Körperlotübungen	Handgriff	Kippschutz	
								 Stehbrett Seite 200-201
								 Stehbrett mit Zusatz KS Seite 201
								 Stehbrett mit Zusatz HG Seite 201
								 Stehbrett mit Zusatz HG und KS Seite 201
								 Stehfeld Seite 202-203
								 Stehfeld mit Zusatz KS Seite 203
								 Stehfeld mit Zusatz HG Seite 203
								 Stehfeld mit Zusatz HG und KS Seite 203

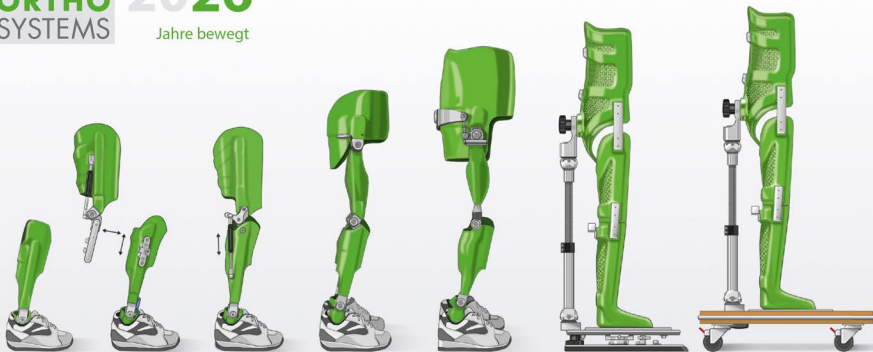

Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwischuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de