

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Klassik-Konso Kniegelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patient:innen

Maximale Flexion von **130°**

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

+ Winkelanpassungen von **0°** bis **40°** in **5°** Schritten

Unterteil mit Schwung oder gerade

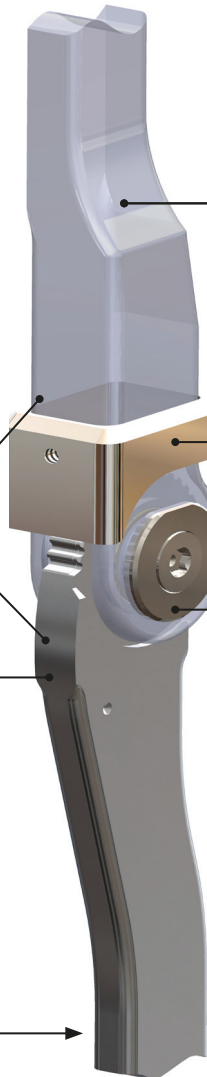


Abb. links

Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kosten-
voranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese
mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität


Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel
Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit
Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

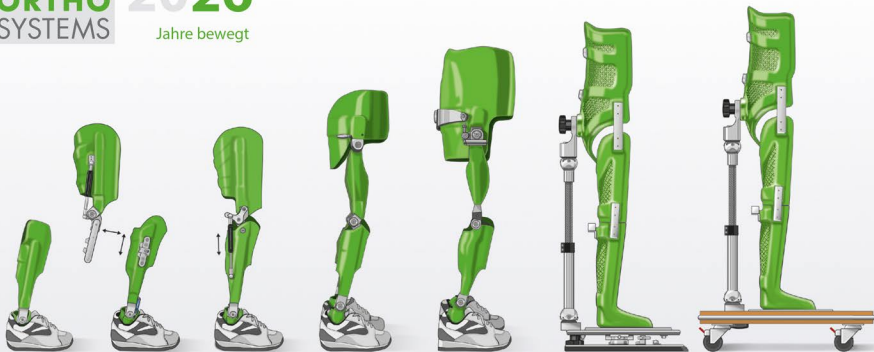


Kontakt


Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwichuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de

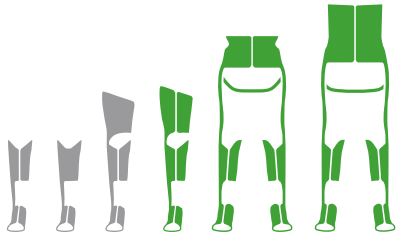


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

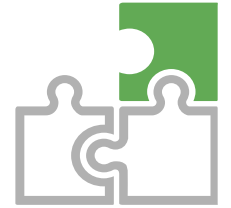

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	KAFO	HKAFO/RGO
Klassik-Konso-22	bis 10 kg	bis 10 kg
Klassik-Konso-25	bis 20 kg	bis 15 kg
Klassik-Konso-28	bis 30 kg	bis 20 kg
Klassik-Konso-30	bis 35 kg	bis 30 kg
Klassik-Konso-32	bis 50 kg	bis 40 kg
Klassik-Konso-36	bis 70 kg	bis 55 kg
Klassik-Konso-40	bis 85 kg	bis 65 kg
Klassik-Konso-40-Plus	bis 85 kg	bis 85 kg

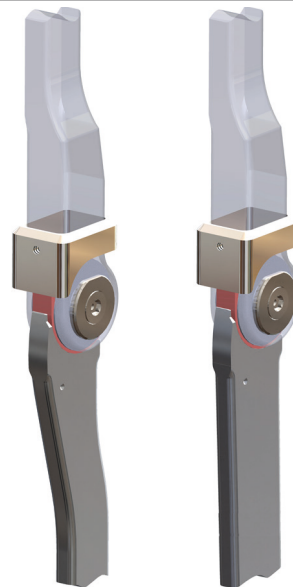

Gelenk

Breite	Stärke	Stärke Fallschloß
22 mm	10,5 mm	15,0 mm
25 mm	13,0 mm	16,5 mm
28 mm	15,0 mm	19,5 mm
30 mm	16,0 mm	20,5 mm
32 mm	17,0 mm	21,0 mm
34 mm	17,0 mm	21,0 mm
40 mm	21,0 mm	26,0 mm
40 mm	22,0 mm	28,0 mm

Klassik-Konso mit Schwung | Klassik-Konso gerade

gesperrt	Streckung in	Beugung in	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	Sperrmechanismus	wasserbeständig